

CROSS™

28715
HYPEREXTENSION
KNEE BRACE



patent pending



Intended use

The brace is intended for mild to moderate knee hyperextension. The brace can also be used together with Allard AFOs when knee hyperextension is present together with foot drop. Intended for one person use.

Indications

Knee hyperextension due to Stroke, Post-Polio or other neuromuscular diseases or injuries like weakening M. Quadriceps or weak calf muscles. Genu recurvatum with intact ML ligaments.

Contraindications

The brace is not intended for sport activity. The brace should not be used when all function in M. Quadriceps is lost or when knee ligaments are disabled. Hyperextension ≥ 15 degrees.

Adjustments

This product should only be altered by a medical professional.

Warnings

Do not use when product is wet or on wet skin. Do not pull the straps too tight as this can cause poor circulation and/or skin irritation. Check the skin on a daily basis and if you see or feel any irritations or other problems, remove the product

immediately. If you have marks or chafing that do not reduce within a short time (30 minutes) contact your clinician immediately. The only approved combination is with an Allard AFO.

Material Specifications

This product is made from Nylon, Lycra, Polyester, Aluminium and Polyurethane. Does not contain Latex. This product is not flame retardant.

Washing Instruction

Remove stays before wash. Close all Velcro straps prior to laundering. Use a washing bag. Machine wash in 40°C (104°F) gentle cycle. Dry flat. Do not tumble dry or dry clean.



Who to Contact

If any problems occur, remove the support and contact your fitter or store where purchased.



Instructions for use

1. Check that the support is complete and without damage.
2. Use the attached graphic instruction sheet to instruct the user to put on and remove. Make sure the user understands the instructions and can self-apply and remove.
3. The joints can be set in various degrees of range-of-motion. Various stops are included in the package. Make sure that both joints have equal setting.
4. Instruct the user how to remove and replace the joints. Each upright is labeled with up/out. Show to the user to ensure that the uprights will be positioned correctly after laundering.
5. Give both this instruction and the pictogram to the user/caregiver after fitting.

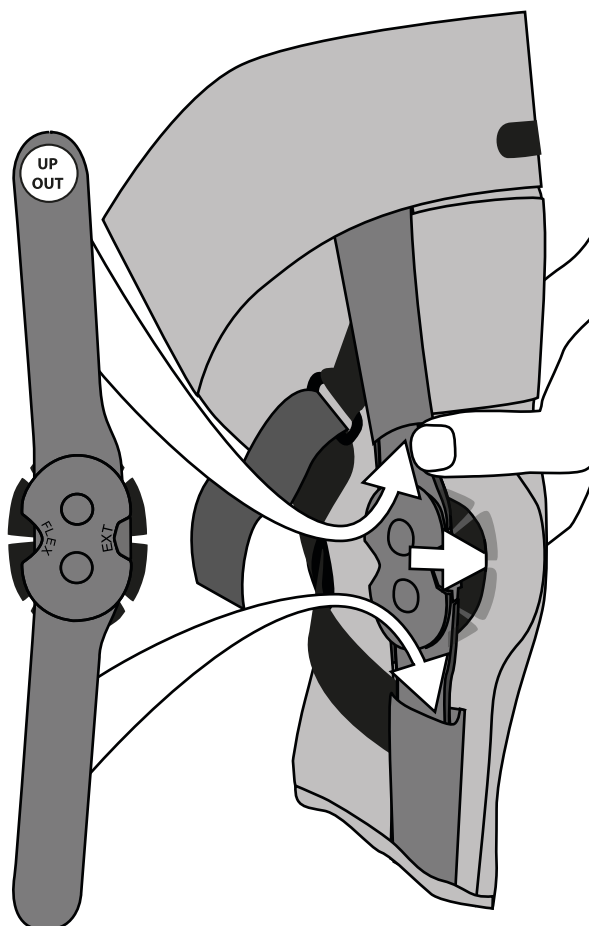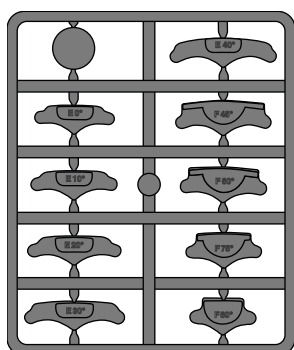

28715 CROSS ORTESIS DE HIPEREXTENSIÓN CRUZADA

Lea detenidamente estas instrucciones antes de utilizar la férula.

Uso previsto

La ortesis está diseñada para la hiperextensión de rodilla leve a moderada. La ortesis también se puede usar junto con los AFO de Allard cuando existe hiperextensión de rodilla junto con caída del pie. Para uso de una sola persona.

Indicaciones

Hiperextensión de la rodilla debida a apoplejía o post-polio, así como a otras enfermedades neuromusculares o lesiones como debilitamiento del cuádriceps o músculos de la pantorrilla. Genu recurvatum con ligamentos ML intactos.

Contraindicaciones

La ortesis no está destinada a la actividad deportiva. La ortesis no debe usarse cuando se pierde toda la función del cuádriceps o los ligamentos de la rodilla no funcionan. Hiperextensión ≥ 15 grados.

Ajustes

Este producto sólo debe ser manipulado por un profesional médico.

Precauciones

No usar cuando el producto esté mojado o sobre la piel húmeda. No apriete demasiado las cinchas ya que esto puede causar mala circulación y/o irritación de la piel. Revise la piel a

diario y si observa o siente alguna irritación u otros problemas, retire el producto de inmediato. Si tiene marcas o rozaduras que no se reducen en poco tiempo (30 minutos), consulte con su médico de inmediato. La única combinación aprobada es con un AFO Allard.

Especificaciones del material

Este producto está hecho de Nylon, Lycra, Poliéster, Aluminio y Poliuretano. No contiene látex. Este producto no es ignífugo.

Instrucciones de lavado

Retire los flejes antes de lavar. Cierre todas las correas de velcro antes de lavarlas. Use una bolsa de lavado. Lavar a máquina a 40°C ciclo suave. No secar en secadora ni limpiar en seco.



Con quién contactar

Si surge algún problema, retire la ortesis y contacte con el establecimiento donde lo adquirió.



Instrucciones de uso




1. Asegúrese de que la ortesis está completa y sin daño.
2. Utilice la hoja gráfica de instrucciones adjunta para enseñar al paciente como ponerse y quitarse la ortesis. Asegúrese de que entiende las instrucciones y es capaz ponerse y quitarse la ortesis por sí mismo.
3. Las articulaciones se pueden configurar para diferentes rangos de movimiento. Se incluyen diferentes topes con el producto. Asegúrese de que ambas articulaciones tengan el mismo ajuste.
4. Indique al usuario cómo quitar y reemplazar las articulaciones. Cada fleje está etiquetado con arriba/fuera. Asegúrese de que el usuario es capaz de montar de nuevo los flejes después del lavado.
5. Después de ajustar la ortesis, entregue estas instrucciones tanto al usuario como al cuidador.

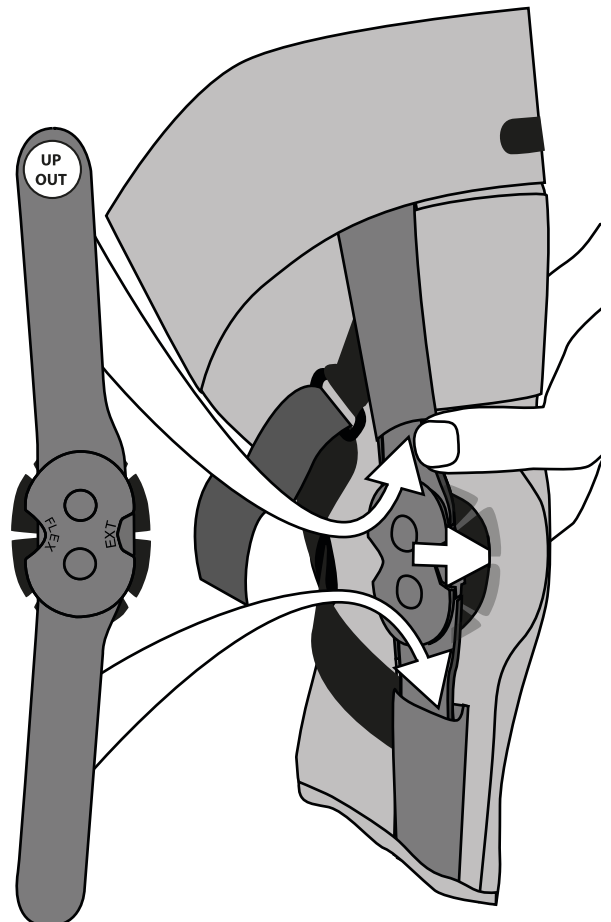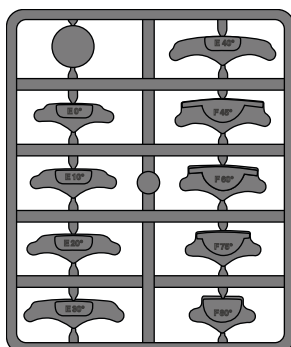




Art.no	Description	Size	Circumference 15cm (6") below mid- patella	Circumference mid-patella	Circumference 15cm (6") above mid-patella
28715 0011	Knee orthosis	Small	32-37cm (13-15")	32-37cm (13-15")	39-44cm (15¼-17¼")
28715 0012	Knee orthosis	Medium	36-41cm (14-16")	36-41cm (14-16")	43-48cm (17-19")
28715 0013	Knee orthosis	Large	40-45cm (15¾-17¾")	40-45cm (15¾-17¾")	47-52cm (18½-20½")
28715 0014	Knee orthosis	X-Large	44-49cm (17¼-19¼")	44-49cm (17¼-19¼")	51-57cm (20-22½")
28716 0000	Pull-On Horn	One size			

Measurements are for guidance only, focus on the mid-patella measurement and try to find the range that fits best.

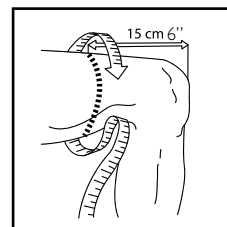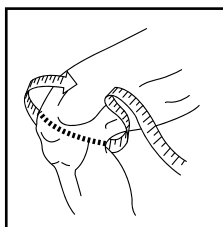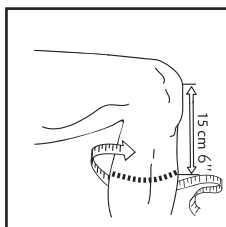

www.youtube.com
Camp Scandinavia, Allard Int. or Allard USA.

This product is distributed by Allard USA (allardusa.com) in North America, and by Allard UK (allarduk.co.uk) in Great Britain and Ireland.

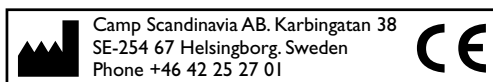

patent pending

SVERIGE	DENMARK	SUOMI	NORGE	UK/IRELAND	USA	INTERNATIONAL
Tel 042-25 27 01	43 96 66 99	09 350 76 30	23 23 31 20	+353 42 932 8177	888-678 6548	+46 42 25 27 01
Fax 042-25 27 25	43 43 22 66	09 350 76 388	23 23 31 21	+353 42 932 8182	800-289 0809	+46 42 25 27 25
info@camp.se	info@camp.dk	info@camp.fi	info@camp.no	info@allarduk.co.uk	info@allardusa.com	info@allardint.com

Support For Better Life • www.allardsupport.com